

<b>Doküman No: IFU-GSP</b> Documentation No: IFU-GSP	<b>İlk yayın tarihi: 02.05.2012</b> Valid from:	<b>Revizyon no: 03</b> Revision no:	<b>Sayfa:1</b> Page:
		<b>Revizyon tarihi: 02.10.2023</b> Revision date:	

**GEOTEK® SUPRAPUBİK DRENAJ KATETER****Kullanma Kılavuzu****TR**

Silikon kaplı foley kateter, yırtılabilir kılıflı trokar ve bisturiden oluşan bir drenaj setidir.

**Endikasyonlar:** Operasyon öncesi veya sonrası mesanenin peruktan olarak boşaltılması için kullanılır.

**Kontraindikasyonlar:** Ciddi enfeksiyonlar, kanama, inkontinans

**Yan Etkiler:** Yabancı maddenin sebep olduğu böbrek / üreter iritasyonu, ağrı, artan miksiyon sıklığı, dizüri, hematüri.

**Uyarılar:** Bu Set sadece bu tür cihazların kullanımında tecrübe sahibi doktorlar tarafından kullanılmalıdır.

kateterizasyonunun doğru işlemlerini sağlamak amacı ile kateterin lokasyonu ve idrar miktarı ile hematuri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Etilen Oksit ile steril edilmiştir. Apropjeniktir. Ambalajı kontrol ediniz, hasarlı veya açık ambalajlı malzemeleri kullanmayınız. Son kullanım tarihini ve kateter ölçüsünü kontrol ediniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız. 5 – 30 °C desaklayınız, direkt ışıktan koruyunuz. Yalnızca tek kullanım içindir. Temizlemeye veya yeniden steril etmeye çalışmayınız

**Suprapubik Kateter Yerleştirme:**

- Kateteri yerleştirmeden önce lokal anestezi uygulayın ve idrari aspire ederek kateter lokasyonunu doğrulayın.
- Deride küçük bir insizyon yapın
- Yırtılabilir kılıflı trokarı yavaşça sokarak ilerletin.
- Mesaneye ulaştığınızda, trokarı çekerek kılıf içinden foley kateteri ilerletin.
- Foley kateterin balonunu şişirerek kateteri mesane duvarına sabitleyin
- Kateteri deriye sabitleyin
- Kılıfı yırtarak foley kateterden ayırın.

**Not:** Burada yazılı talimatlar herhangi bir medikal veya cerrahi tekniği tanımlamak veya önermek amacı taşımamaktadır. Bu ürünlerle uygulanacak uygun teknik ve prosedürlerin sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

**GEOTEK MEDİKAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ**  
ALCI OSB MAH. 2014 CAD. NO:11 SINCAN / ANKARA  
TEL:+90312 3959852  
FAX:+90312 3959853

**GEOTEK® SUPRAPUBİK DRAINAGE CATHETER****Instruction for Use****ENG**

It is a complete set which includes; Silicone coated Folley catheter, Peel away trocar and scalpel.

**Indications:** is intended use for pre or post operative bladder drainage via suprapubic way

**Contraindications:** Serious infections, hematuria, incontinence

**Side Effects:** Kidney, bladder irritation caused by foreignbody, pain, infection, increased miction-frequency, hematuria

**Cautions:** This Kit should be used by only by physicians experienced in the use of such device.

Regular monitoring of location and free passage of catheter is necessary to evaluate darinage efficiency.

Ethylene oxide sterilized. Non-pyrogenic. Check the package. if package damaged or opened do not use the products. Check the expiry date and the gauge. Do not use over expired products. Store in dry place, between 5 – 30 °C temperature, protect from sun light. Possible allergic reactions should be considered. For single Patient Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. Disposal as a biohazard after use.

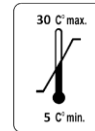
**Placement of Suprapubic Catheter:**

- Apply local anesthetic to before introducing the catheter and confirm catheter location with aspirating urine.
- Make small incision to the skin
- Insert peel away sheath and advance it carefully.
- Remove the trocar and insert the folley catheter through sheath.
- Inflate the balloon of folley catheter and fix the catheter in to bladder wall.
- Fix the catheter to skin with fixation disk.
- Remove the sheath by tearing down along the folley catheter.

**Note:** These instructions are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual practitioner is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this device.

**CE**

1984: CE Mark and NB identification number

Single Use  
sterilized

Storage limits



Expiry Date

STERILE EO

Ethylene oxide